



Mini Daylight - Manuel d'utilisation
Model – ELE018838A



Zéro-Plus International Limited



Rev.201704

votre médecin, qui vous a indiqué d'éviter toute exposition à la lumière intense en raison d'un traitement bien spécifique (comme certains antidépresseurs, médicaments psychotropes ou comprimés pour la malaria) ;

- vous avez une tension artérielle élevée ;
- vous avez la peau sensible à la lumière, comme pour le lupus érythémateux disséminé.

Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes décrits ci-dessus, vous devez consulter votre médecin avant de commencer à utiliser cet appareil

Effets secondaires possibles :

Il est possible que vous ayez les effets secondaires suivants :

- maux de tête ;
- yeux fatigués ;
- troubles du sommeil ;
- nausées.

Pour éviter, minimiser ou calmer ces effets secondaires, vous pouvez :

- augmenter la distance d'exposition ;
- éviter d'utiliser la lampe en soirée ou avant d'aller dormir ;
- arrêter d'utiliser l'appareil pendant quelques jours afin de supprimer les effets secondaires, puis réessayer.

2. Pictogrammes et symboles

Les symboles et pictogrammes suivants apparaissent dans cette notice, ainsi que sur l'appareil :

	Message d'avertissement indiquant un risque de blessure ou d'effets néfastes.		Lisez la notice d'utilisation avant toute utilisation.
Avertissement			
	Message d'avertissement indiquant que l'élément ou l'accessoire peut être endommagé.		Consultez la notice d'utilisation.
Important			
	Remarque attirant l'attention sur des informations importantes.		Attention : consultez la documentation fournie avec le produit !
Remarque			
O/I	ARRÊT/MARCHE		Équipement de catégorie II
SN	Numéro de série de la lampe Mini Daylight.		Date de fabrication
	Représentant accrédité au sein de la Communauté européenne		Fabricant
IP20	Indice de protection		Craint l'humidité
	Risque de brûlure. Ne pas toucher.		

3. Normes de sécurité et de performance

La lampe « Mini Daylight » a été conçue et fabriquée conformément aux normes de sécurité et de performance les plus strictes, y compris en matière de compatibilité électromagnétique. La lampe « Mini Daylight » répond aux critères imposés par la norme suivante :



Cet appareil répond aux critères de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

4. Références normatives

Lignes directrices et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique correspondant aux descriptions faites ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit s'assurer de la conformité de l'environnement.			
Essai d'immunité	Niveau de l'essai CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Ligne directrice
Décharge électrostatique CEI 61000-4-2	±6 kV contact ±8 kV air	±6 kV contact ±8 kV air	Le sol doit être revêtu de bois, de ciment ou de carreaux de céramique. S'il est revêtu de matière synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides en salves CEI 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation ± 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie	± 2 kV pour les lignes d'alimentation ± 1 kV pour les lignes d'entrée/de sortie	La qualité de l'alimentation du secteur doit correspondre à celle d'un environnement classique commercial ou hospitalier.
Ondes de choc CEI 61000-4-5	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode normal	± 1 kV en mode différentiel ± 2 kV en mode normal	La qualité de l'alimentation du secteur doit correspondre à celle d'un environnement classique commercial ou hospitalier.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension CEI 61000-4-11	< 5 % U_T (creux > 95 % en U_T) pour 0,5 cycle 40 % U_T (creux 60 % en U_T) pour 5 cycles 70 % U_T (creux 30 % en U_T) pour 25 cycles < 5% U_T (creux > 95% en U_T) pour 5 sec.	< 5 % U_T (creux > 95 % en U_T) pour 0,5 cycle 40 % U_T (creux 60 % en U_T) pour 5 cycles 70 % U_T (creux 30 % en U_T) pour 25 cycles < 5% U_T (creux > 95% en U_T) pour 5 sec.	La qualité de l'alimentation du secteur doit correspondre à celle d'un environnement classique commercial ou hospitalier. Si l'utilisateur de la lampe « Mini Daylight » a besoin d'un fonctionnement continu même lors des coupures du secteur, il est recommandé de relier la lampe « Mini Daylight » à une source d'alimentation sans interruption ou une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50-60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être du même niveau que ceux d'un environnement habituel de type commercial ou hospitalier.
NOTE : U_T représente la tension du secteur en cc avant l'application du niveau de l'essai.			

4. Références normatives (Suite)

Lignes directrices et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique			
La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique correspondant aux descriptions faites ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit s'assurer de la conformité de l'environnement.			
Essai d'immunité	Niveau de l'essai CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Ligne directrice
Émission RF par conduction CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz	3 V	<p>Tout équipement de communication portable et mobile par RF ne doit être utilisé qu'au-delà d'une certaine distance de la lampe « Mini Daylight » et de tous ses éléments, y compris les câbles. Cette distance se calcule à partir de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur.</p> <p>Distance recommandée</p> <p>$d=1,2\sqrt{P}$ $d=1,2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz $d=2,3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz</p>
Émission RF par rayonnement CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	3 V/m	<p>Où P est la puissance de sortie maximale nominale du transmetteur en watts (W) d'après les données du fabricant et d est la distance recommandée en mètres (m).</p> <p>Les forces de champ des transmetteurs RF fixes, déterminées par une étude électromagnétique du site^a, doivent être inférieures au niveau de conformité de chaque plage de fréquences^b. Des interférences peuvent survenir à proximité d'équipements affichant le symbole suivant :</p> 
NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.			
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.			
<p>^a Les forces de champ des transmetteurs fixes, tels que les stations de téléphones radio (portables/sans fil) ainsi que les radios terrestres mobiles, émissions radios amateurs, AM, FM et télévisées, ne peuvent pas être prédites précisément de façon théorique. Pour évaluer l'environnement électromagnétique imputable aux transmetteurs RF, une étude électromagnétique du site doit être envisagée. Si la force de champ de l'endroit où est utilisée la lampe « Mini Daylight » dépasse le niveau de conformité RF précisé ci-dessus, l'appareil doit être vérifié attentivement lors de l'utilisation pour vérifier qu'il fonctionne normalement. Si un dysfonctionnement est constaté, des mesures correctives pourront être nécessaires, telles qu'une réorientation ou un déplacement de la lampe « Mini Daylight ».</p> <p>^b Au-delà de la plage de fréquence 150 kHz à 80 MHz, les forces de champ doivent être inférieures à $[V_1]$ V/m</p>			

4. Références normatives (Suite)

Lignes directrices et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques		
La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique correspondant aux descriptions faites ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la lampe « Mini Daylight » doit s'assurer de la conformité de l'environnement.		
Essai d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Ligne directrice
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	La lampe « Mini Daylight » n'utilise de l'énergie radioélectrique que pour son fonctionnement interne. Ses émissions RF sont donc très faibles, et ne sont guère susceptibles de provoquer des interférences avec les équipements électroniques proches.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	La lampe « Mini Daylight » est adaptée à une utilisation dans tous les établissements, y compris les immeubles résidentiels et les établissements directement reliés au réseau public d'alimentation basse tension alimentant les bâtiments réservés à des usages privés.
Émissions de courant harmonique CEI 61000-3-2	Classe A	
Émissions avec variations de tension/papillotement CEI 61000-3-3	Conforme	

Distances recommandées entre les équipements de communication portables et mobiles à RF et la lampe « Mini Daylight »			
La lampe « Mini Daylight » est destinée à une utilisation dans un environnement électromagnétique où les perturbations des émissions RF par rayonnement sont maîtrisées. Le client ou l'utilisateur du dispositif médical « Mini Daylight » peut contribuer à éviter les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimum entre les équipements de communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et la lampe « Mini Daylight », suivant les recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.			
Puissance nominale de sortie maximum du transmetteur (W)	Distance en fonction de la fréquence du transmetteur (m)		
	150 kHz à 80 MHz $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	80 MHz à 800 MHz $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$	800 MHz à 2,5 GHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0.12	0.12	0.23
0,1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
Pour les transmetteurs affichant une puissance nominale autre que celles présentées ci-dessus, la distance recommandée d , en mètre (m), peut être estimée à partir de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie maximale nominale du transmetteur en watts (W) d'après les données du fabricant.			
NOTE 1 : À 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s'applique.			
NOTE 2 : Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.			

5. Remarques

Veillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Veillez à ce qu'elles soient accessibles aux autres utilisateurs, et respectez les consignes données.

Remarques relatives à la sécurité



Attention !

- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu humide.
- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les parties de l'emballage sont retirées et que le produit ou accessoire ne comporte aucune trace visible d'endommagement. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le revendeur ou le service client indiqué.
- La lampe « Mini Daylight » n'est pas destinée à être utilisée par une personne aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées (y compris les enfants), ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elle agisse sous la supervision, ou qu'elle ait reçu des instructions relatives à l'utilisation du produit par une personne sous la responsabilité de qui elle est placée.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte, afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Tenez le câble éloigné de tout objet à température élevée ou flamme.
- La distance minimum à respecter entre l'appareil et tout objet inflammable est de 1,0 mètre.
- Reliez le produit au secteur en vous assurant qu'il s'agit exclusivement de l'un des voltages listés sur la plaque signalétique.
- Attention, risque de brûlure : ne pas toucher la lampe pendant son fonctionnement, et la laisser refroidir 10 minutes après extinction
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation, et laissez-le refroidir avant de le manipuler.
- Ne touchez pas le produit avec des mains humides alors que celui-ci est branché ; faites en sorte que le produit ne reçoive jamais d'eau. L'appareil ne doit être mis en marche que lorsqu'il est parfaitement sec.
- Protégez l'appareil contre les chocs.
- Évitez de tirer sur le câble pour débrancher l'appareil. Tirez plutôt sur la prise.
- Si le câble ou le revêtement est endommagé, contactez le service client ou le revendeur, car des outils spéciaux sont nécessaires pour en faire la réparation. Ne tentez jamais de

- réparer le produit vous-même.
- La déconnexion du réseau d'alimentation générale ne peut être garantie que si la prise d'alimentation a été débranchée. Ne placez pas l'appareil de telle façon qu'il soit difficile d'accéder à la prise.
- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation en présence de mélanges anesthésiques inflammables en contact avec de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde d'azote.
- L'appareil ne nécessite aucune calibration, examen préventif ou entretien.
- L'appareil n'est pas réparable et contient des pièces inaccessibles à l'utilisateur.
- L'opérateur ne doit pas toucher l'appareil et le patient simultanément.
- Aucune modification de l'appareil n'est autorisée.
- Ne modifiez pas cet équipement sans l'autorisation du fabricant.
- En cas de modification de cet équipement, un examen approprié et un essai doivent être réalisés afin de déterminer l'innocuité de l'utilisation de l'appareil.

5. Remarques (suite)

Généralités



Important

- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation commerciale ou médicale, mais uniquement à des fins individuelles, privées et domestiques.
- Si vous êtes sous traitement médical et que vous prenez des antalgiques, antihypertenseurs ou antidépresseurs, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Les personnes souffrant de troubles de la rétine ainsi que les diabétiques doivent être examinés par un ophtalmologue avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de cataracte, glaucome, maladie du nerf optique en général ou inflammation du corps vitré.
- Si vous souffrez de quelque trouble de santé que ce soit, consultez votre médecin généraliste !

Réparations



Important

- N'ouvrez l'appareil que pour remplacer l'ampoule. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même : risque d'accident grave. Le non respect de cette recommandation entraîne la nullité de la garantie.

- En cas d'endommagement de l'appareil, quel qu'il soit, ou de non fonctionnement, ne faites pas fonctionner l'appareil. Tentez de résoudre le problème à l'aide du tableau FAQ. Si le problème persiste, contactez le service client ou le revendeur, car des outils spécifiques sont nécessaires aux réparations. Ne tentez jamais de réparer l'appareil vous-même.

6. Contrôle au déballage

Nous veillons à ce que votre commande soit complète et corresponde exactement à votre demande. Toutefois, pour vous en assurer, veuillez contrôler le contenu de votre colis par rapport à votre bordereau de commande.

l'appareil est conçu pour vous offre une grande simplicité d'utilisation, et ne nécessite qu'un assemblage minimum. Votre colis doit contenir les éléments suivants :


1 (une) lampe « Mini Daylight »

1 (un) manuel de l'utilisateur

Examinez attentivement chaque élément lors du déballage afin de détecter tout endommagement qui serait survenu au cours du transport.

- Vérifiez les articles en vous référant au bordereau de commande.
- Détectez tout endommagement ou défaut éventuel. Ne tentez pas d'assembler l'appareil si quelque composant que ce soit est endommagé ou défectueux. Dans un tel cas, contactez immédiatement votre fournisseur.

7. Description du produit

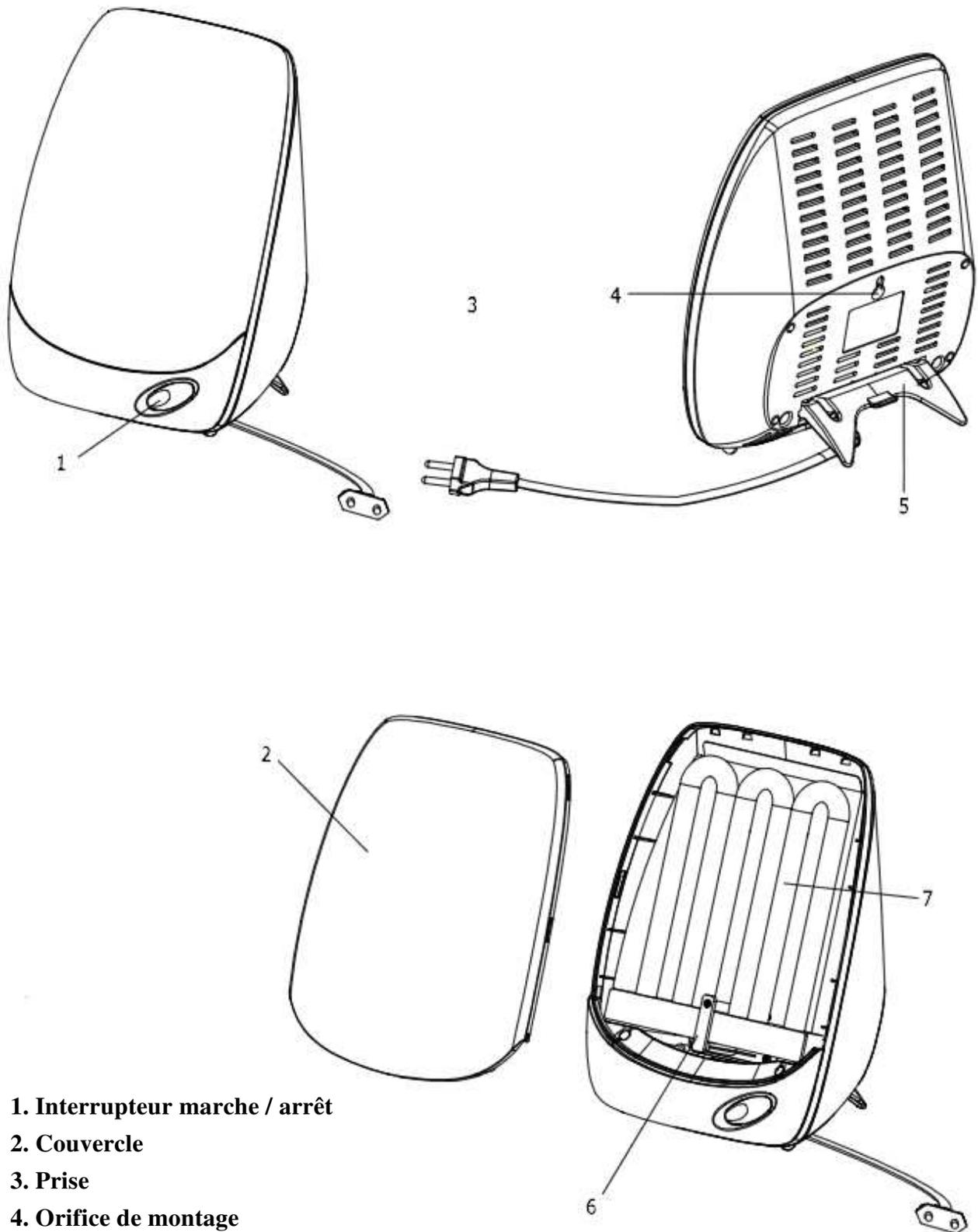

- 1. Interrupteur marche / arrêt
- 2. Couvercle
- 3. Prise
- 4. Orifice de montage
- 5. Support dépliable
- 6. Pince de fixation de l'ampoule
- 7. Ampoule 45 W

8. Préparation de l'appareil avant utilisation

Préparation

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Placez l'appareil sur une surface solide, telle qu'une table, et ajustez le trépied pliant.
3. Il est recommandé de placer la lampe à 15-35 cm du visage lors de l'utilisation.

Branchement au secteur

Reliez le produit au secteur en vous assurant qu'il s'agisse d'un des voltages listés sur la plaque signalétique.

- Insérez à fond la fiche dans la prise.



Note

- Assurez-vous qu'une prise est présente près de l'endroit où se trouvera la lampe.
- Disposez le câble d'alimentation de telle façon que personne ne puisse trébucher.

Fixer la lampe « Mini Daylight » à un mur

Le dos de l'appareil comporte un orifice de montage qui peut servir à fixer l'appareil au mur à l'aide d'une vis. Suivant le type de construction du mur, il vous faudra utiliser une vis adaptée, éventuellement avec une fiche. Exemple : pour un mur en béton, utilisez des vis autotaraudeuses M4 x 25 mm en inox, vissées dans une cheville. Vis et chevilles ne sont pas fournies.



Important

Si l'orifice de montage ou la partie arrière est fendue ou endommagée, ne pas fixer la lampe « Mini Daylight » au mur. Contactez le service client ou le revendeur.

9. Fonctionnement

1. Allumer la lampe

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe « Mini Daylight ».



Note

La luminosité des ampoules peut sembler faible à l'allumage. Les ampoules atteignent leur pleine luminosité après quelques minutes.

2. Exposition à la lumière

À présent, asseyez-vous face à la lampe, à une distance qui vous semble confortable, entre 15 cm et 35 cm. Vous pouvez poursuivre vos activités habituelles tout en utilisant la lampes (lire, écrire, téléphoner, etc.).

Lors de l'utilisation de la lampe, essayez de maintenir la distance recommandée de 15 cm à 35 cm entre votre visage et la lampe.

Les recommandations d'utilisation sont les suivantes :

- Environ 2 heures à 35 cm
- Environ 1 heure 30 à 25 cm
- Anviron 30 minutes à 15 cm

Plus vous vous tenez près de la lampe, plus le temps d'utilisation nécessaire est court.



Note

- Ne regardez pas directement la lampe de manière continue. Lors des sessions initiales, certaines personnes peuvent ressentir des douleurs aux yeux ou des légers maux de tête. Ces troubles s'estompent rapidement. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, réduire vos durées d'exposition jusqu'à retrouver un confort d'utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Ne touchez pas l'appareil en fonctionnement. Laissez l'appareil refroidir au moins 10 minutes avant de le manipuler.

3. Exposition à la lumière sur de longues périodes

Pendant la période la plus sombre de l'année, répéter le traitement pendant au moins 7 jours consécutifs, ou plus longtemps, suivant vos besoins.

4. Éteindre la lampe

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre la lampe « Mini Daylight ». Débranchez la prise d'alimentation.



Note

- Laissez l'appareil refroidir au moins 10 minutes avant de le toucher ou de le ranger.

10. Remplacement des ampoules

Remplacer les tubes fluorescents :

Vous pouvez remplacer tout tube fluorescent défectueux ou arrivé en fin de vie.

REMARQUE : Ne remplacez pas le tube fluorescent n'ayant pas été fourni par le fournisseur.

Pour remplacer ce tube, suivez la démarche décrite ci-dessous.

Avertissement

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Pour des raisons de sécurité, n'enlevez pas d'autres composants et vis que ceux et celles mentionnés ci-dessous.

1. Desserrez les vis de fixation situées à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un tournevis et enlevez la protection avant.



2. Ôtez le ressort de maintien transparent à l'aide d'un tournevis.



3. Enlevez le tube du boîtier en tirant délicatement et remplacez-le par un tube neuf.



4. Une fois que le nouveau tube est mis en place, suivez ces instructions dans le sens inverse.

11. Nettoyage d'une ampoule cassée

Les ampoules de la lampe contiennent une faible quantité de mercure. Lorsqu'une ampoule se brise à l'intérieur de votre domicile, une partie de ce mercure s'échappe sous forme de vapeur. Pour limiter l'exposition à la vapeur de mercure, nous recommandons de respecter les étapes de nettoyage et d'élimination suivantes :

Avant le nettoyage:

- Faire sortir les personnes et les animaux domestiques de la pièce, et aérer 5 à 10 minutes en ouvrant une fenêtre ou une porte donnant sur l'extérieur.
- Éteindre le système de chauffage à air pulsé ou la climatisation, le cas échéant.
- Réunir le matériel nécessaire au nettoyage (papier rigide ou carton, ruban adhésif, papier essuie-tout ou serviette jetable humide).

Pendant le nettoyage :

- Il est déconseillé de passer l'aspirateur, sauf si des morceaux de verre demeurent une fois toutes les autres étapes du nettoyage achevées. L'aspirateur pourrait rejeter dans l'air de la poudre contenant du mercure ou des vapeurs de mercure.
- Collecter soigneusement tout le verre brisé et la poudre visible.
- Placer les déchets dans un contenant hermétique.

Après le nettoyage :

- Placer rapidement tous les débris de l'ampoule et les déchets à l'extérieur, dans une poubelle ou, à défaut, dans un endroit protégé en attendant de pouvoir les jeter convenablement. Éviter de laisser des fragments d'ampoule ou des déchets de nettoyage à l'intérieur.
- En pratique, continuer à aérer la pièce où l'ampoule s'est brisée et laisser le système de chauffage/climatisation éteint pendant plusieurs heures.

12. Nettoyage



Important

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous de toujours l'éteindre, le débrancher et le laisser refroidir.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide, additionné d'un peu de détergent si nécessaire.
- Prenez garde à ne pas faire entrer d'eau à l'intérieur de l'appareil, et à ne pas renverser de l'eau dessus.
- Le nettoyage de l'appareil peut être fait une fois par mois.

13. Rangement

Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la lampe doit être rangée dans un lieu sec, hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil branché à une source d'alimentation électrique. La lampe est conçue pour être rangée dans les conditions suivantes:

- 1) Température ambiante comprise entre -20°C (-4°F) et 50°C (122°F).
- 2) Humidité relative de 90 % maximum.
- 3) A Pression atmosphérique comprise entre 700 et 1 060 hPa

14. Élimination



Ce produit comporte le logo WEEE sur le côté gauche. Cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires, mais doit être collecté séparément, avec les déchets d'équipement électrique et électronique.

Pour toute question, veuillez contacter le service local chargé de la collecte des déchets.

15. FAQ

Panne	Cause possible	Solutions
Pas de lumière	Hors tension	Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt
	Pas d'alimentation électrique	L'appareil n'est pas bien branché, ou la prise est défectueuse.
	Ampoule mal fixée	Fixer l'ampoule correctement.



Important

Ce chapitre liste les questions les plus fréquentes à propos de l'appareil. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans les FAQ, contactez le service client ou le revendeur.

16. Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P)	270 x 207 x 80 mm
Poids	0.8 kg
Sources lumineuses	Ampoules 45 W, lumière du jour (spectre complet) Durée de vie: 8000 hours
Références pour le remplacement des ampoules (données par le fournisseur des ampoules)	MP45 3U
Fusible	T3.15AH250V
Puissance	45 watts
Intensité lumineuse	> 10,000 lux à 15cm
Branchement au secteur	220 V ~240V, 50 Hz
Environnement de fonctionnement	De +10°C à +25°C (+50°F à +77°F) Humidité relative de 30 % à 90 % Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa
Environnement de rangement	De -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) Humidité relative de 90 % max. Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa
Environnement de transport	De -20°C à +50°C (-4°F à +122°F) Humidité relative de 90 % max. Pression atmosphérique de 700 à 1 060 hPa
Classification du produit	1. Équipement de classe II 2. Partie non appliquée 3. Étanchéité à l'eau : IP20 4. Cette lampe n'est pas un appareil de classe AP ou APG 5. Mode de fonctionnement: fonctionnement continu.
Durée de la garantie	2 ans

Sujet à modifications techniques.

17. Coordonnées de contact

Importée par Nature & Découvertes :

Nature & Découvertes
Versailles Grand Parc
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble - France
N° Service Client : +33 (0)1 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com

La lampe « Mini Daylight » est fabriquée par :

Zéro-Plus International Ltd.
Room 1004, 10/F., Join-In Hang Sing Centre,
71-75 Container Port Road, Kwai Chung,
New Territories, Hong Kong
Tel: 44-20-71936086

Représentant européen agréé :

I-Plus Company Ltd.
4B Christchurch House, Beaufort Court,
Medway City Estate, Rochester, Kent. ME2 4FZ, UK
Tel: (44)-20-71936086
Email: i-plus@zeroplus.hk



Important

En cas d'endommagement de l'appareil, quel qu'il soit, ou de non fonctionnement et si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans les FAQ, contactez le service client ou le revendeur.